


AllerSnap™ Prueba de prevención de alérgenos de alta sensibilidad

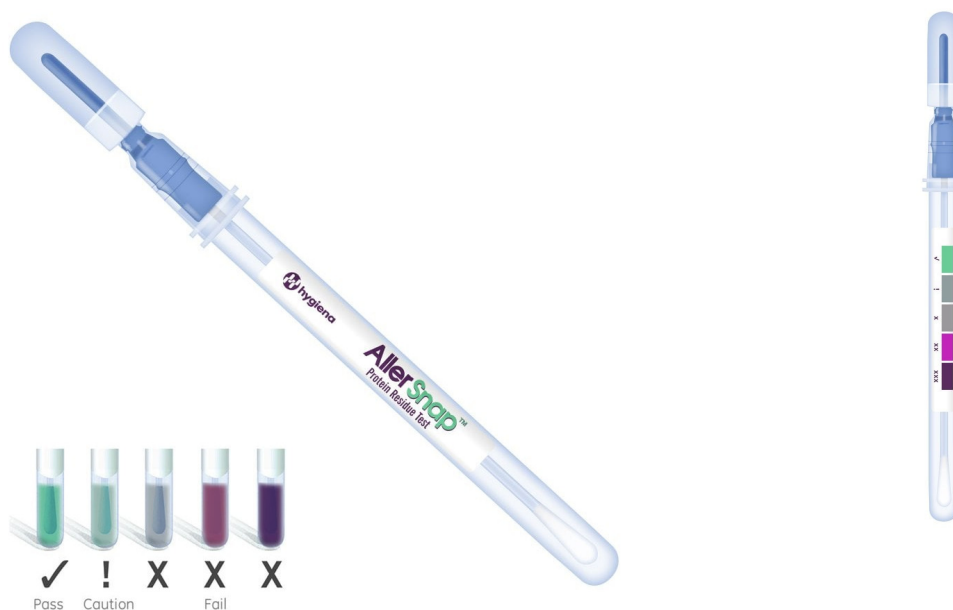

AllerSnap™ monitorea con precisión la limpieza de la superficie para ayudar a garantizar la calidad del producto al detectar residuos de proteínas que quedan en una superficie después de la limpieza. Simplemente limpie una superficie, libere el reactivo, incube y, si hay residuos de proteína, el reactivo se volverá violeta.

- Resultados inmediatos, en 15-30 minutos, en colores más profundos significan más contaminación.
- Detección de proteínas no específicas de amplio rango más rápida que las pruebas de alérgenos específicos.
- Vida útil de 18 meses a temperatura ambiente o refrigerada (2 - 25 ° C)
- Los dispositivos de baja huella de carbono son 100% reciclables
- Sensibilidad:
- Detecta 3 µg de proteína después de 30 minutos, a 37 ° C o 15 minutos a 55 ° C